





# LAPRA-TY® II

Fadenfixierclip.  
Der König der Knoten

 **Ethicon Products**  
W O R L D W I D E  
A division of ETHICON, GmbH  
a Johnson & Johnson company

## LAPRA-TY® II Fadenfixierclip

Die schnelle Alternative zu  
klassischem Knotensetzen.

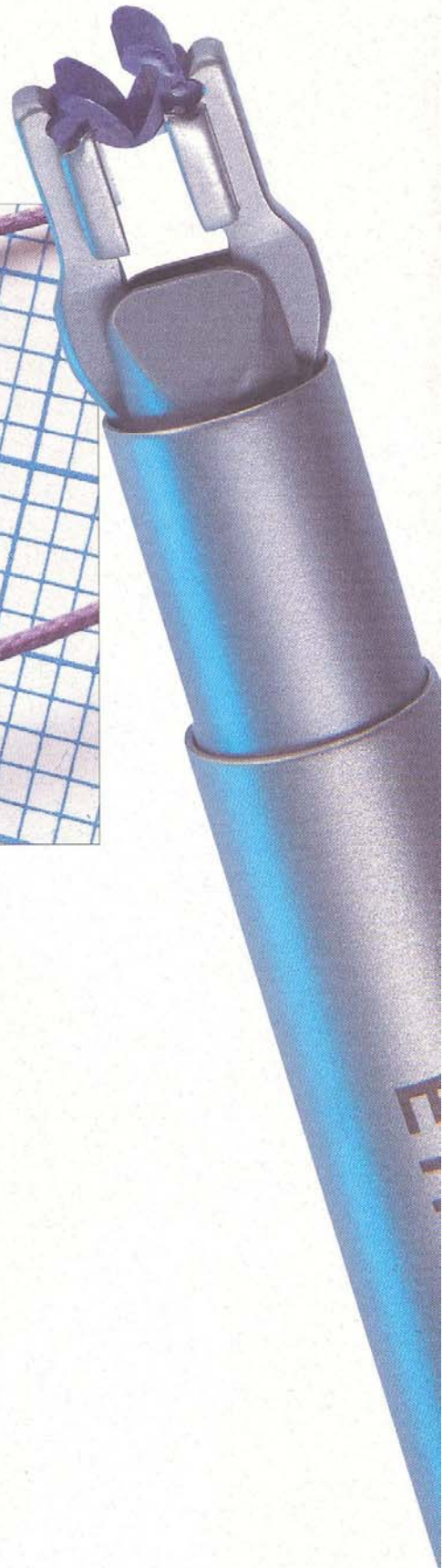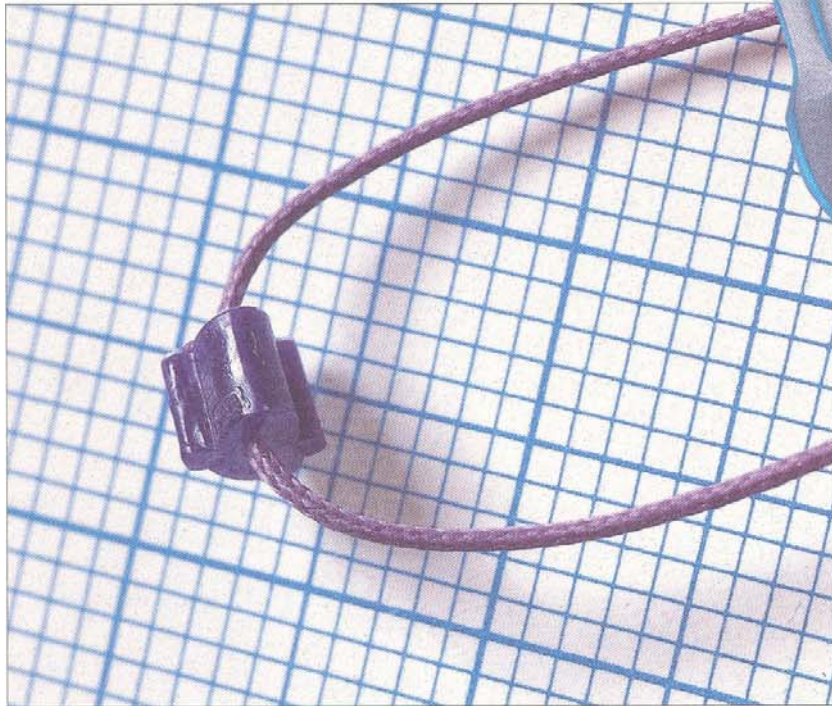


### STECKBRIEF: LAPRA-TY® II CLIP

Material: PDS II  
Sichere Adaption  
von Clip und Faden: ca. 14 Tage  
Vollständige  
Resorption: ca. 210 Tage  
Zu fixierender  
VICRYL-Faden: 2/0, 3/0 und 4/0

- Resorbierbar.
- Zeitersparnis durch Knotenersatz.
- Leichte, schnelle Applikation.
- Ausgezeichneter, vollkommen geschlossener Sitz auf dem Faden.

Der neuartige Fadenfixierclip LAPRA-TY® II aus resorbierbarem PDS II-Material spart kostbare Zeit ein, wo sonst zur Fixation von intrakorporal gelegten Nähten ein hoher Zeitaufwand notwendig ist.

Durch den komfortabel und schnell einzusetzenden Fadenfixierclip, der mittels der speziellen LAPRA-TY® Applikationszange auf dem Faden fixiert wird, entfällt das aufwendige und zeitraubende Knotensetzen durch den Chirurgen.

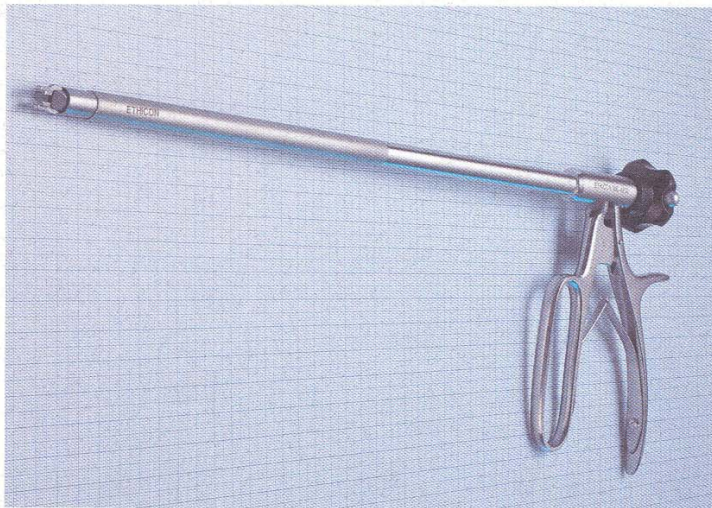

Die LAPRA-TY® Applikationszange ist komfortabel anzuwenden, da sie im Winkel von 360° drehbar ist und somit den Faden jederzeit sicher umschließen kann.

Die Clips können sicher und vollkommen sitzfest auf VICRYL der Stärke 2/0, 3/0 bzw. 4/0 gesetzt werden.

Die LAPRA-TY® Applikationszange ist wiederverwendbar und aufgrund ihrer dreiteiligen Bauweise außerordentlich leicht zu reinigen und zu sterilisieren.

#### STECKBRIEF: LAPRA-TY® APPLIKATIONSZANGE

- Wiederverwendbares Metallinstrument.
- 360° drehbar.
- Einfaches und sicheres Setzen des Clips.
- Dreiteilig demontierbar zur einfachen Reinigung und Sterilisation.

#### LIEFERPROGRAMM

##### LAPRA-TY® Applikationszange

Code-Nr.	Verpackungseinheit
MIC 4030	1 Stück, unsteril

##### LAPRA-TY® II Clip, PDS II

Code-Nr.	Verpackungseinheit
MIC 4032	2 Clips im Magazin 6 Magazine pro Packung
MIC 4034	4 Clips im Magazin 6 Magazine pro Packung
MIC 4036	6 Clips im Magazin 6 Magazine pro Packung

MICOM

## ETHICON HOTLINES:

Telefon 040 - 52 97 01  
Fax 040 - 527 38 91

Aufträge und Anfragen  
werden im Hause  
ETHICON durch ein  
permanentes  
Online-System  
sofort bearbeitet.  
Das verkürzt Lieferzeiten  
auf ein absolutes  
Minimum.

So werden im ETHICON  
Auslieferungslager  
täglich mehrere  
hundert Aufträge  
bearbeitet.  
Für ständige  
Verfügbarkeit  
sorgt ein 5000 m<sup>2</sup>  
großes Lager,  
in dem unsere Produkte  
zum unverzüglichen  
Versand  
bereitstehen.

Übertroffen wird unser  
Lieferservice  
allein durch unsere  
Flexibilität bei Eilaufträgen.  
Hier bemühen wir  
die gesamte  
interne und externe  
Logistik  
von der hauseigenen  
Fahrzeugflotte  
bis hin zu  
Flugkurierdiensten,  
um Ihnen zu liefern,  
worauf Sie nicht warten  
können.

ETHICON Products  
Robert-Koch-Straße 1  
D-22851 Norderstedt

JOHNSON & JOHNSON Medical Products  
Gunoldstraße 16  
A-1190 Wien  
Telefon 01 - 360 25-0  
Fax 01 - 36 02 55 02

JOHNSON & JOHNSON Medical  
Rotzenbühlstrasse 55  
CH-8957 Spreitenbach  
Telefon 056 - 417 33 33  
Fax 056 - 417 35 24

 gedruckt auf recyceltem Umweltpapier

 **Ethicon Products**  
WORLDWIDE  
A Division of ETHICON  
a Johnson & Johnson company

© ETHICON, 1,5.Dü 03.03, B.-Nr. 17

